



# Muskelstimulator, kabellos Stimulateur musculaire sans fil

Art.-Nr. 241591



## BETRIEBSANLEITUNG MODE D'EMPLOI

CH-IMPORTEUR: MAX TRADA AG · CHURERSTRASSE 82 · CH-8808 PFÄFFIKON / SZ

**03 – 14    BETRIEBSANLEITUNG**

**15 – 26    MODE D'EMPLOI**

## **INHALTSVERZEICHNIS**

---

- 4 Spezielle Sicherheitshinweise zu diesem Gerät
- 6 Gerätebeschreibung
- 7 Vor der Inbetriebnahme
- 8 Inbetriebnahme
- 10 Problembehebung
- 11 So können Sie kleinere Beschwerden lindern
- 12 Reinigung und Lagerung
- 13 Entsorgung und Garantie
- 14 Technische Daten

DEUTSCH

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde

Wir gratulieren Ihnen zu dieser praktisch-kleinen Muskelstimulatoren, mit welchen Sie 4 unterschiedliche Muskelpartien gleichzeitig stimulieren können.

Bitte lesen Sie vor der Montage und Inbetriebnahme diese Gebrauchsanleitung aufmerksam durch, um sich mit Ihrem neuen Gerät vertraut zu machen und maximale Betriebssicherheit zu erzielen. Besonders müssen die Sicherheitsbestimmungen berücksichtigt werden, um Unfälle und Schäden zu vermeiden. Wir empfehlen, die Anleitung zum späteren Nachlesen sorgfältig aufzubewahren.

## **SPEZIELLE SICHERHEITSHINWEISE ZU DIESEM GERÄT**


---

- Wischen Sie die Körperpartie, auf welcher der Muskelstimulator geklebt werden soll, mit einem Handtuch sauber, so dass sie frei von Schweiß und Fett ist. Die Körperpartie sollte unverletzt sein, also keine Schnitte, Wunden etc. aufweisen.
- Das selbsthaftende Pad mit Gel muss während des Gebrauchs fest auf der Haut sitzen. Sollten Sie während der Benutzung Pads auswechseln müssen, schalten Sie das Gerät immer erst aus.
- Das Gerät und die Pads sollten während der Benutzung nicht mit Metall wie Ketten, Armbänder etc. in Kontakt kommen.
- Benutzen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen.
- Stimulieren Sie eine Körperpartie nicht zu lange, dies könnte Hautrötungen verursachen. Platzieren Sie das Pad an einer anderen Stelle, wenn es Ihnen an der angewandten Stelle unangenehm werden sollte.
- Lagern Sie das Produkt nicht bei hohen Temperaturen oder in einer feuchten oder staubigen Umgebung. Gerät immer ausser Reichweite von Kindern aufbewahren.

- Ältere oder auf Hilfe angewiesene Menschen sollten das Gerät nicht alleine anwenden.
- Das Gerät nicht während der Autofahrt, beim Schlafen oder Baden benutzen.
- Kinder dürfen das Gerät nicht benutzen.
- Verwenden Sie immer nur die selbsthaftenden Pads von wellcraft mit diesem Produkt. Das Pad sollte aus hygienischen Gründen nur von einer Person benutzt werden.
- Sollte Sie sich während der Anwendung unwohl fühlen, benutzen Sie den Muskelstimulator nicht weiter.
- **Wenn die selbsthaftenden Pads mit Gel nicht mehr gut auf der Haut haften bleiben, nehmen Sie sie von der Haut und bearbeiten Sie die Gel-Oberfläche mit einer kleinen Menge Wasser: So können Sie die Haftfestigkeit wieder herstellen und die Pads erneut verwenden, sobald sie trocken sind.**
- Der Muskelstimulator sollte in folgenden Fällen nicht verwendet werden:
  - wenn Sie gleichzeitig andere medizinischen Geräte benutzen,
  - während Sie schlafen oder Auto fahren,
  - wenn Sie schwanger sind.
- Halten Sie das Gerät immer mindestens 1 Meter von Geräten mit Kurzwellen oder von Mikrowellenöfen entfernt.



## GERÄTEBESCHREIBUNG

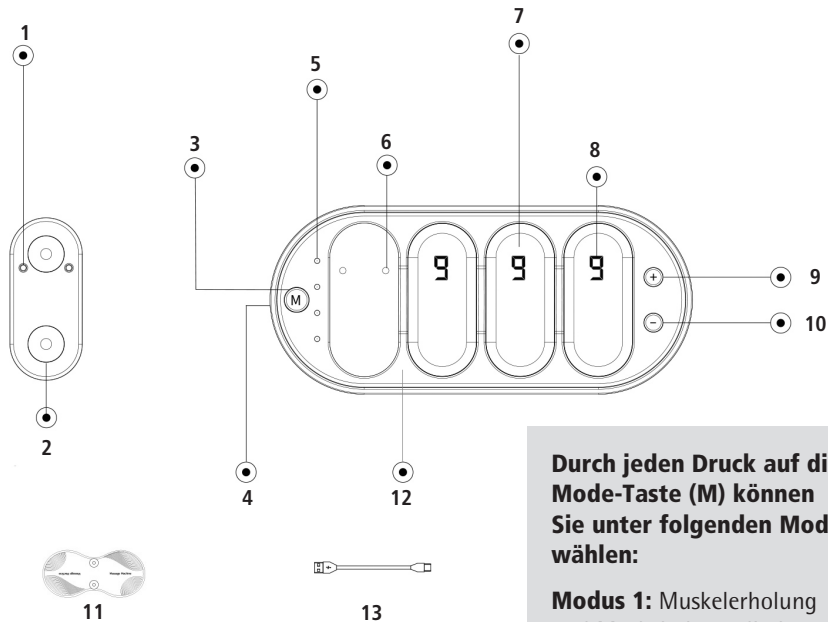

- |                                 |                                |
|---------------------------------|--------------------------------|
| 1 Ladekontaktpunkt              | 9 Erhöhen                      |
| 2 Magnet                        | 10 Absenken                    |
| 3 Schalter/Mode-Taste (M)       | 11 Selbsthaftendes Pad mit Gel |
| 4 Ladebuchse                    | 12 Ladebox                     |
| 5 Modus-Anzeige                 | 13 USB-Ladekabel Typ C         |
| 6 Ladekontaktpunkt              |                                |
| 7 Stimulator                    |                                |
| 8 Anzeige der Stimulationsstufe |                                |

**Durch jeden Druck auf die Mode-Taste (M) können Sie unter folgenden Modi wählen:**

**Modus 1:** Muskelerholung und Muskelschmerzinderung

**Modus 2:** Verbesserung der Blutzirkulation

**Modus 3:** Aktiviert die Zellvitalität und löst Verspannungen

**Modus 4:** Reguliert die Blutzirkulation, den Blutdruck und reduziert Schwellungen


## VOR DER INBETRIEBNAHME

### ■ GERÄT LADEN

- Legen Sie die 4 Stimulatoren in die Ladebox. Ziehen Sie dazu vorher die Schutzfolie von den Stimulatoren ab. Verbinden Sie die Ladebox mit dem Ladekabel und stecken Sie das Ladekabel in einen USB-Anschluss.
- Während des Ladens blinkt das rote Licht bei der Mode-Taste (M). Sobald das blaue Licht der Box konstant leuchtet, sind die Stimulatoren und die Box voll geladen. Während die Stimulatoren laden, blinkt „0“ im Display. Der Ladevorgang dauert ca. 2 Stunden.

### ■ MÖGLICHE STIMULATIONS-PUNKTE



- **Empfohlen werden folgende Partien:**  
Schultern, Rücken, Taille, Gliedmassen
- **Nicht massiert werden sollen folgende Partien:**  
Kopf, Hals, Brust, sensible Körperstellen

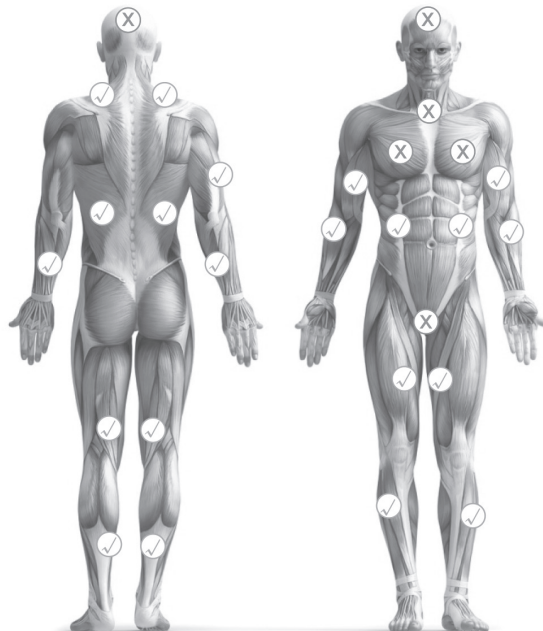



## INBETRIEBNAHME

### ■ STIMULATOREN HERAUSNEHMEN UND AN AUFKLEBERN BEFESTIGEN



- Wenn die 4 Stimulatoren geladen sind, nehmen Sie so viele, wie Sie benötigen, heraus, sie schalten sich dadurch automatisch ein. „0“ leuchtet im Stimulator auf, dies bedeutet, sie befinden sich im Standby-Modus.

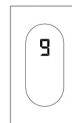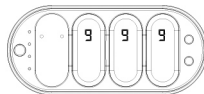


- Legen Sie die Stimulatoren auf die Gel-Pads, sie werden magnetisch angezogen und festgehalten.

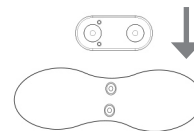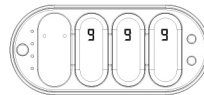

- Ziehen Sie die Schutzfolien von den Gel-Pads ab und kleben Sie sie fest an die Position, die Sie massieren möchten.
- Stellen Sie nun den gewünschten Modus mit der Modus-Taste (M) auf der Ladebox ein und die Intensität mit der + oder – Taste an der Ladebox. Die eingestellte Intensität leuchtet im Stimulator auf.

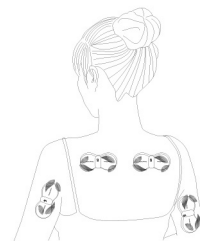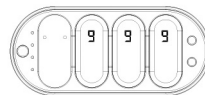

- **Hinweis:** Wenn Sie innerhalb von 10 Minuten diese Einstellung nicht vornehmen, schalten sich die Stimulatoren automatisch aus.
- Die Stimulation dauert nun 15 Minuten, danach schalten sich die Stimulatoren automatisch in den Standby-Modus, „0“ leuchtet wieder jeweils auf. Nach 10 Minuten im Standby-Modus schalten sich die Stimulatoren aus. Nach einem Durchgang, d.h. nach insgesamt 25 Minuten Betriebsdauer, schaltet sich auch die Ladebox aus.

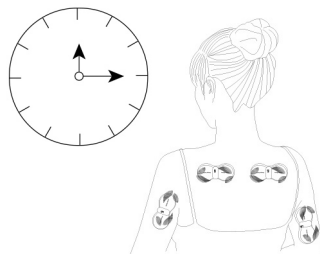

- **Hinweis für schwache Batterie:** Wenn während der Massage die Zahl im Stimulator blinkt und das rote Ladelicht in der Ladebox blinkt, bedeutet dies, dass das Gerät dringend aufgeladen werden muss.
- Um das Gerät vor Ablauf der 15 Minuten auszuschalten, drücken Sie lange die Mode-Taste (M): Das Gerät schaltet sich sofort aus.
- **Hinweise:**
  - Sollte sich der Stimulator nach dem Entnehmen aus der Ladebox nicht einschalten und „0“ anzeigen, ist die Batterieleistung zu niedrig und das Gerät muss umgekehrt geladen werden.
  - Wenn Sie den Stimulator während des Betriebs von der Haut abnehmen, blinkt die Intensitäts-Ziffer und er schaltet sich nach 5 Minuten automatisch aus.

**PROBLEMBEHEBUNG**

<b>PROBLEM</b>	<b>MÖGLICHE URSACHE</b>	<b>LÖSUNG</b>
<b>Der Stimulator kann nicht eingeschaltet werden.</b>	Der Ladestatus der Ladebox ist niedrig.	Ladebox und Stimulatoren laden.
<b>Gerät schaltet sich während des Betriebs aus. / Es können keine Einstellungen vorgenommen werden.</b>	Niedriger Ladestatus.	Ladebox und Stimulatoren laden.
<b>Gerät lässt sich nicht laden.</b>	Spannungs- und Stromfehler der Ladebox.	Kontaktieren Sie Ihre Verkaufsstelle.
<b>Keine Anzeige beim Laden.</b>	Ladestatus zu niedrig.	Laden Sie das Gerät länger.
<b>Lange Ladedauer.</b>	Niedriger Ladestatus.	Laden Sie das Gerät länger.
<b>Keine Reaktion auf das Laden.</b>	Ladebox oder Ladekabel beschädigt.	Ladebox oder Ladekabel ersetzen. Kontaktieren Sie Ihre Verkaufsstelle.

- **Hinweise:**

- Um eine Fehlfunktion des Geräts zu vermeiden, kann das Ladekabel nicht an einer Schnelllade-Buchse (Quick-Charge) angeschlossen werden, um es aufzuladen.
- Um einen einwandfreien Betrieb zu gewährleisten, sollten Sie das Produkt einmal im Monat vollständig aufladen.

## SO KÖNNEN SIE KLEINERE BESCHWERDEN LINDERN

### ■ ZERVIKALE SPONDYLOSE

- **Ursachen können sein:** falsche Schlafhaltung, falsche Kopfhaltung während des Arbeitens (Kopf wird lange nach unten geneigt), schlafen auf einem hohen Kissen
- **Anwendung:** Platzieren Sie den Stimulator wie abgebildet, um die Nackenschmerzen und -verspannungen zu lindern.
- **Dauer der Anwendung:** 15 Minuten



### ■ LUMBALER BANDSCHEIBENVORFALL

- **Ursachen können sein:** Altersbedingte Beschwerden, falsche Haltung beim Bücken (wenn man den Rücken zu sehr krümmt), Rundrücken
- **Anwendung:** Platzieren Sie den Stimulator wie abgebildet, um die Stabilität zu stärken und Schmerzen zu lindern.
- **Dauer der Anwendung:** 15 Minuten



### ■ SCHMERZENDE BEINE

- **Ursachen können sein:** langes Stehen, Überanstrengung
- **Anwendung:** Platzieren Sie den Stimulator wie abgebildet, um die Blutzirkulation in den Beinmuskeln zu aktivieren und Muskelverspannungen zu reduzieren.
- **Dauer der Anwendung:** 15 Minuten



### REINIGUNG UND LAGERUNG

---

- Reinigen Sie die Gel-Pads und die Stimulatoren mit einem leicht feuchten, weichen Tuch und trocknen Sie alle Teile anschliessend mit einem trockenen Tuch.
- Bewahren Sie die Stimulatoren am besten sicher verstaut in der Ladebox auf. Lagern Sie das Gerät in einem trockenen Raum, geschützt vor zu hohen oder zu niedrigen Temperaturen, Staub und Feuchtigkeit. Achten Sie darauf, dass das Gerät ausser Reichweite von Kindern ist.
- Schützen Sie das Gerät vor starken Vibrationen und Stößen, lassen Sie es nicht rollen oder herunterfallen.

### ■ PERIODISCHES LADEN DES AKKUS

Um eine Tiefenentladung zu verhindern, muss der Akku auch bei Nichtgebrauch alle 3 Monate aufgeladen werden. Ein Nichteinhalten dieses Vorgangs hat ein Erlöschen der Garantie des Akkus zur Folge. Ob ein Akku tiefenentladen ist kann von unserem technischen Dienst festgestellt werden.

## ENTSORGUNG · GARANTIE

---

### ■ ENTSORGUNG

Ausgediente Geräte müssen unbrauchbar gemacht werden und dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Bitte bringen Sie Ihr Gerät in die nächste Wertstoff-Sammlung, damit recyclebares Material wieder verwendet wird und Ihr Gerät einer umweltgerechten Entsorgung zugeführt wird. Entfernen Sie dazu vorab das Ladekabel vom Gerät.



### ■ ENTSORGUNG DES AKKUS

- Dieser Akku entspricht der neuesten Technologie und wird Ihnen viele Jahre gute Dienste erweisen. Da Akkus allerdings auch für die Umwelt gefährliche Substanzen enthalten, darf er nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden.
- Bevor Sie den Muskelstimulator entsorgen, entnehmen Sie den Akku und bringen Sie ihn zu einer Wertstoff-Sammlung, damit der Akku recycled werden kann bzw. umweltgerecht entsorgt wird.



### ■ GARANTIE

- Das Gerät hat zwei Jahre Garantie ab Verkaufsdatum. (Rechnung aufbewahren!)
- Schäden die von falschem Gebrauch herrühren fallen nicht unter die Garantieansprüche.

**TECHNISCHE DATEN**

---

<b>Modell</b>	wellcraft Muskelstimulator, kabellos
<b>Art.-Nr.</b>	241591
<b>Lade-Eingang</b>	Typ-C 5V, 1A
<b>Lade-Ausgang</b>	5 V, 0.025A*4
<b>Leistung</b>	3 W
<b>Ladedauer</b>	ca. 2 h
<b>Batteriekapazität</b>	Ladebasis: 850mAh, Stimulator jeweils 30mAh
<b>Modi</b>	4 Modi / 9 Stimulationsstärken
<b>Arbeitsprinzip</b>	EMS
<b>Gewicht</b>	ca. 170 g
<b>Abmessungen</b>	Ladebasis: 125x55x30 mm Stimulator: 46x20x10 mm
<b>Geprüft</b>	CE
<b>Erfüllt EU-Vorschriften</b>	Ja
<b>Produkt-Garantie</b>	2 Jahre

Technische Änderungen vorbehalten.



## SOMMAIRE

---

- 16 Consignes de sécurité spéciales pour cet appareil
- 18 Description de l'appareil
- 19 Avant la première mise en service
- 20 Mise en service
- 22 Dépannage
- 23 Pour soulager des petites douleurs
- 24 Nettoyage et rangement
- 25 Mise au rebut et garantie
- 26 Caractéristiques techniques

Chère cliente, cher client

Nous vous félicitons pour l'achat de cet stimulateur musculaire, petit et pratique, qui vous permettra de stimuler simultanément 4 groupes musculaires différents.

Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi avant le montage et la mise en service, pour vous familiariser avec cet appareil et obtenir une sécurité de fonctionnement optimale. Prenez particulièrement compte les directives de sécurité, pour éviter des accidents et dommages. Nous recommandons de conserver soigneusement ce mode d'emploi pour une consultation ultérieure.

## **CONSIGNES DE SECURITE SPECIALES POUR CET APPAREIL**


---

- Séchez avec une serviette la partie de votre corps sur laquelle vous voulez faire adhérer le stimulateur musculaire afin d'éliminer toute trace de sueur et de graisse. La peau ne doit pas présenter de blessures, c'est-à-dire qu'elle ne doit pas présenter de coupures, de plaies, etc.
- Le coussinet auto-adhésif avec gel doit bien adhérer sur la peau pendant l'utilisation de l'appareil. Si vous devez changer le coussinet en cours d'utilisation, éteignez toujours tout d'abord l'appareil.
- L'appareil et les coussinets ne doivent pas entrer en contact avec des métaux comme des chaînes, des bracelets, etc. lorsque l'appareil est en marche.
- N'utilisez pas l'appareil avec des mains humides.
- Ne stimulez pas une partie corporelle trop longtemps, cela risquerait de causer des rougeurs sur la peau. Si vous ressentez une gêne à l'endroit où vous avez appliqué le coussinet, déplacez-le sur une autre partie de votre corps.

- Ne rangez pas l'appareil dans un endroit où les températures sont trop élevées ou dans un environnement trop humide ou poussiéreux. Rangez toujours l'appareil hors portée des enfants.
- Les personnes âgées ou dépendantes ne doivent pas utiliser l'appareil seules.
- N'utilisez pas l'appareil en conduisant, pendant votre sommeil ou votre bain.
- Les enfants ne sont pas autorisés à utiliser l'appareil.
- Utilisez toujours exclusivement les coussinets auto-adhésifs de wellcraft avec ce produit. Pour des raisons d'hygiène, chaque utilisateur doit disposer de ses propres coussinets.
- Si vous ne vous sentez pas bien pendant l'utilisation de l'appareil, ne l'utilisez plus.
- **Si les coussinets auto-adhésifs avec gel n'adhèrent plus à la peau, retirez-les et travaillez-les avec une petite quantité d'eau : Vous pouvez ainsi rétablir l'adhérence et réutiliser les coussinets dès qu'ils sont secs.**
- Le stimulateur musculaire ne doit pas être utilisé dans les cas suivants :
  - si vous utilisez en même temps d'autres appareils médicaux,
  - pendant votre sommeil ou lorsque vous êtes au volant d'un véhicule,
  - si vous êtes enceinte.
- Tenez l'appareil toujours au moins à 1 mètre d'écart d'appareils émettant des ondes courtes ou des fours à microondes.



## DESCRIPTION DE L'APPAREIL

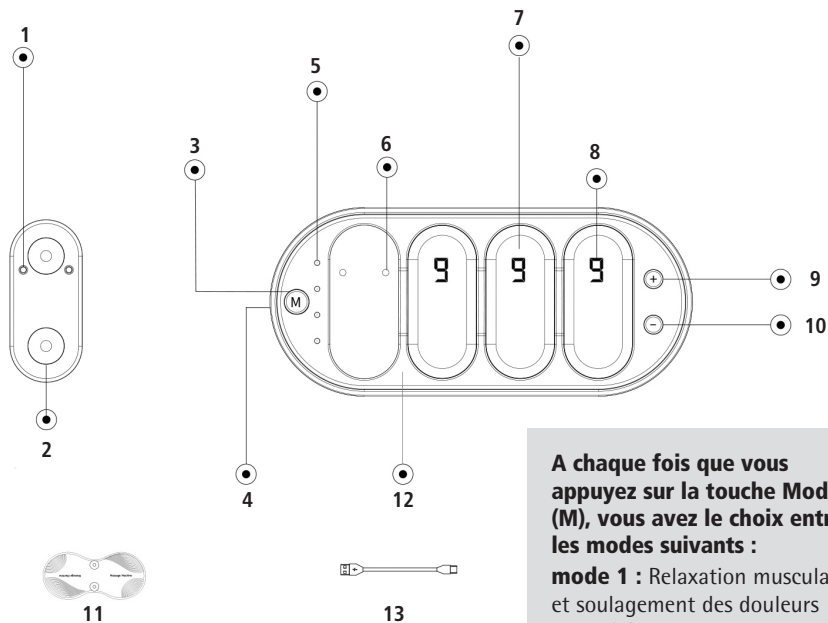

- 1 Point de contact de charge
- 2 Aimant
- 3 Interrupteur / touche Mode (M)
- 4 Fiche de charge
- 5 Témoin du degré de stimulation
- 6 Point de contact de charge
- 7 Stimulateur

- 8 Témoin du degré de stimulation
- 9 Augmenter
- 10 Diminuer
- 11 Coussinet autocollant avec gel
- 12 Boîtier chargeur
- 13 Câble de charge USB type C

**A chaque fois que vous appuyez sur la touche Mode (M), vous avez le choix entre les modes suivants :**

**mode 1 :** Relaxation musculaire et soulagement des douleurs musculaires

**mode 2 :** Amélioration de la circulation sanguine

**mode 3 :** Stimulation de la vitalité cellulaire et soulagement des tensions

**mode 4 :** Régulation de la circulation sanguine, de la tension artérielle et réduction des boursofflures


## AVANT LA MISE EN SERVICE

### ■ CHARGER L'APPAREIL

- Placez les 4 stimulateurs dans le boîtier chargeur. Retirez pour cela tout d'abord le film de protection des stimulateurs. Branchez le boîtier sur le câble de charge et branchez le câble de charge dans un port USB.
- Pendant la charge le voyant rouge clignote sur la touche Mode (M). Dès que le voyant bleu du boîtier s'allume en continu, les stimulateurs et le boîtier sont entièrement chargés. Pendant que les stimulateurs sont en charge, « 0 » clignote sur l'écran. La durée de charge est d'environ 2 heures.

### ■ POINTS DE STIMULATION POSSIBLES


- **Les parties corporelles suivantes sont recommandées :**  
Epaules, dos, taille, membres
- **Les parties suivantes ne doivent pas être massées :**  
Tête, gorge, poitrine, parties corporelles sensibles

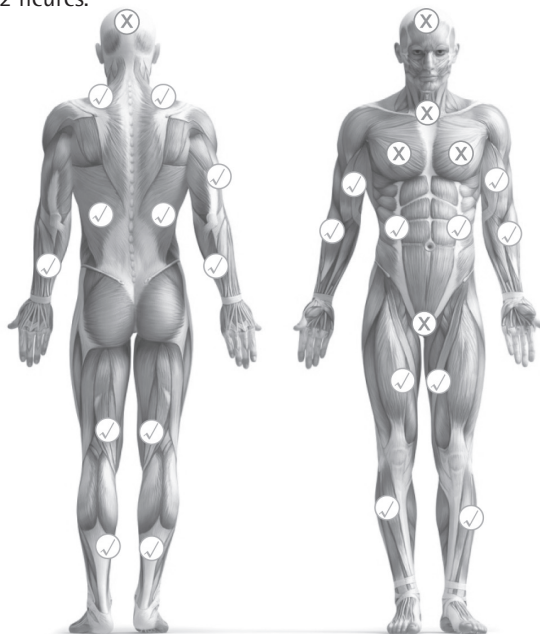



## MISE EN SERVICE

### ■ RETIRER LES STIMULATEURS ET FIXER-LES AUX AUTOCOLLANTS

- Lorsque les 4 stimulateurs sont chargés, retirez le nombre de stimulateurs dont vous avez besoin du boîtier, ils se mettent alors automatiquement en marche. « 0 » s'affiche sur le stimulateur, cela signifie que le stimulateur est sur le mode de veille.


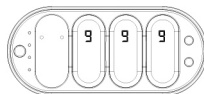


- Placez les stimulateurs sur les coussinets avec gel, ils sont attirés magnétiquement et y adhèrent.

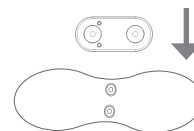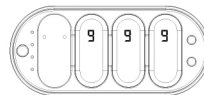


- Retirez les films de protection des coussinets et appliquez-les bien sur l'endroit que vous voulez masser.

- Réglez alors le mode souhaité avec la touche Mode (M) sur le boîtier et l'intensité avec la touche + ou - située sur le boîtier. L'intensité réglée s'affiche sur le stimulateur.

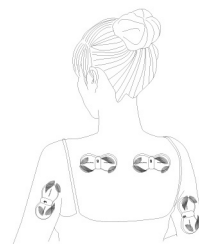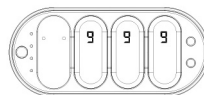

- **Remarque:** Si vous n'effectuez pas ce réglage dans les 10 minutes, les stimulateurs s'éteignent automatiquement.
- La stimulation dure 15 minutes, puis les stimulateurs repassent automatiquement sur le mode de veille. « 0 » s'affiche à nouveau. Au bout de 10 minutes sur le mode de veille, les stimulateurs s'éteignent complètement. Après un cycle, c'est-à-dire après 25 minutes au total, le boîtier s'éteint également.

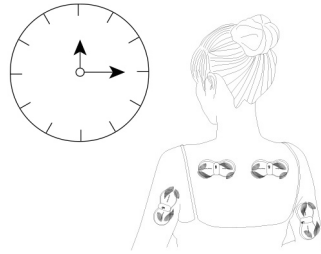

- **Remarque pour une batterie faible :** Si le chiffre dans le stimulateur clignote pendant le massage et le voyant de charge rouge situé dans le boîtier clignote également, cela signifie que l'appareil doit être rechargé le plus rapidement possible.
- Pour éteindre l'appareil prématurément, c'est-à-dire avant que les 15 minutes ne se soient écoulées, appuyez de manière prolongée sur la touche Mode (M) : L'appareil s'éteint immédiatement.
- **Remarques :**
  - Si le stimulateur ne se met pas en marche lorsque vous le retirez du boîtier et « 0 » ne s'affiche pas, cela signifie que la puissance de la batterie est trop faible et que l'appareil doit être rechargé immédiatement.
  - Si vous retirez le stimulateur de la peau pendant qu'il est en marche, le chiffre du degré d'intensité clignote et il s'éteint automatiquement au bout de 5 minutes.

## DEPANNAGE

PROBLEME	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION
Le stimulateur ne peut pas être mis en marche.	L'état de charge du boîtier est trop faible.	Chargez le boîtier et les stimulateurs.
L'appareil s'éteint pendant qu'il est en marche. / Il n'est pas possible d'effectuer des réglages.	Etat de charge faible.	Chargez le boîtier et les stimulateurs.
L'appareil ne peut pas être chargé.	Erreur de tension ou électrique du boîtier.	Contactez votre point de vente.
Pas de voyant pendant la charge.	Etat de charge trop faible.	Chargez l'appareil plus longtemps.
Durée de charge longue.	Etat de charge faible.	Chargez l'appareil plus longtemps.
Pas de réaction pendant la charge.	Boîtier ou câble de charge défectueux.	Remplacez le boîtier ou le câble de charge. Contactez votre point de vente.

- **Remarques :**

- Pour éviter un dysfonctionnement de l'appareil, le câble de charge ne doit pas être branché sur une fiche pour charge rapide (quick-charge).
- Afin de garantir un bon fonctionnement, nous vous recommandons de charger complètement le produit une fois par mois.

## POUR SOULAGER DES PETITES DOULEURS

### ■ SPONDYLOSE CERVICALE

- **Les causes peuvent être :** mauvaise position de sommeil, mauvaise position de la tête pendant le travail (la tête est inclinée vers l'avant trop longtemps), dormir sur un oreiller trop gros
- **Utilisation :** Placez le stimulateur comme indiqué sur l'illustration pour soulager les douleurs et tensions au niveau du cou.
- **Durée de l'utilisation :** 15 minutes



### ■ HERNIE DISCALE LOMBAIRE

- **Les causes peuvent être :** douleurs dues à l'âge, mauvaise position lorsque vous vous penchez (si vous courbez trop le dos), dos rond
- **Utilisation :** Placez le stimulateur comme indiqué sur l'illustration pour renforcer la stabilité et soulager les douleurs.
- **Durée de l'utilisation :** 15 minutes



### ■ JAMBES DOULOUREUSES

- **Les causes peuvent être :** position debout trop longue, surmenage
- **Utilisation :** Placez le stimulateur comme indiqué sur l'illustration pour activer la circulation sanguine dans les muscles des jambes et réduire les tensions musculaires.
- **Durée de l'utilisation :** 15 minutes



## NETTOYAGE ET RANGEMENT

---

- Nettoyez les coussinets et les stimulateurs avec un chiffon doux et légèrement humide puis séchez le tout avec un chiffon sec.
- Rangez les stimulateurs de préférence dans le boîtier. Rangez l'appareil dans une pièce sèche, protégez-le de températures trop élevées ou trop faibles, de la poussière et de l'humidité. Prenez soin que l'appareil soit hors portée des enfants.
- Protégez l'appareil de vibrations trop importantes et de coups, ne le faites pas rouler ou tomber.

### ■ CHARGE PÉRIODIQUE DE LA BATTERIE

Pour éviter une décharge profonde, la batterie doit être rechargée tous les 3 mois, même lorsqu'elle n'est pas utilisée. Le non-respect de cette procédure annule la garantie de la batterie. Notre service technique peut déterminer si une batterie est profondément déchargée ou non.

## MISE AU REBUT · GARANTIE

---

### ■ MISE AU REBUT

Les appareils en fin de vie doivent être rendus inutilisables et ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Veuillez rapporter votre appareil au centre de tri le plus proche pour que les matériaux recyclables puissent être réutilisés et votre appareil mis au rebut en respectant l'environnement. Retirez pour cela tout d'abord le câble de charge.



### ■ MISE AU REBUT DE LA BATTERIE

- La batterie répond à la technologie de pointe et vous rendra de bons et loyaux services pendant des années. Etant donné toutefois que les batteries contiennent des substances dangereuses pour l'environnement, la batterie ne doit pas être jetée avec les ordures ménagères.
- Avant de mettre l'appareil au rebut, veuillez retirer la batterie et la rapporter à un centre de tri pour qu'elle puisse être recyclée ou mise au rebut en respectant l'environnement.



### ■ GARANTIE

- L'appareil a une garantie de 2 ans à partir de la date d'achat (conservez votre facture !)
- Les dommages causés par une mauvaise utilisation ne sont pas couverts par la garantie.

**CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**

---

<b>Modèle</b>	Stimulateur musculaire sans fil, wellcraft
<b>No. d'article</b>	241591
<b>Entrée de charge</b>	type C 5V, 1A
<b>Sortie de charge</b>	5 V, 0.025A*4
<b>Puissance</b>	3 W
<b>Durée de charge</b>	env. 2 heures
<b>Capacité de la batterie</b>	boîtier chargeur 850 mAh, stimulateur, chacun 30 mAh
<b>Modes</b>	4 modes / 9 degrés de stimulation
<b>Principe de fonctionnement</b>	EMS
<b>Poids</b>	env. 170 g
<b>Dimensions</b>	boîtier chargeur : 125x55x30 mm stimulateur : 46x20x10 mm
<b>Certifié</b>	CE
<b>Répond aux normes UE</b>	oui
<b>Garantie produit</b>	2 ans

Sous réserve de modifications techniques.

